

# **Elektrický pulzní masážní přístroj**

**Návod k použití**

## Obsah

Obsah.....	2
O přístroji .....	3
Hlavní výhody Elektrického pulzního masážního přístroje .....	3
Uvnitř balení.....	3
Popis funkcí.....	4
Upozornění .....	5
Nemělo by uniknout Vaší pozornosti .....	5
Příprava k použití .....	6
Instalace baterie.....	6
Metody používání.....	6
Umístění elektrod .....	6
Intenzita a nastavení rychlosti .....	7
Tlačítko "REPEAT" .....	7
Masáž pomocí masážních pantoflí .....	7
Vypnutí přístroje po použití .....	7
Údržba .....	7
Řešení problémů.....	8
Technická specifikace .....	8

Děkujeme, že jste si pořídili Elektrický pulzní masážní přístroj. Předtím, než jej začnete používat, si, prosíme, pečlivě přečtete návod k použití. Návod uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.


## O přístroji

### Hlavní výhody Elektrického pulzního masážního přístroje


- 1) Je to multifunkční zařízení s funkcemi akupunktury, Guasha, baňkování a masáže. Pečuje o ramena, pas, dlaně, chodidla, nohy.
- 2) Velký a elegantní LCD displej.
- 3) Činnost ovládá mikroprocesor, disponuje vyspělou technikou.
- 4) Funkce vlastní kontroly s 5 sekundovým a 15 minutovým intervalem. Po odejmutí elektrod z kůže se přístroj po 5 sekundách vypne. Po 15 minutách činnosti se přístroj také sám vypne.
- 5) Elektrody  
Dokážou přenést 5 - 15  $\mu\text{m}$  elektromagnetické vlny do lidského těla, což má velice příznivé účinky, např. podporují prokrvení jednotlivých částí těla.

## Uvnitř balení


1. Hlavní část

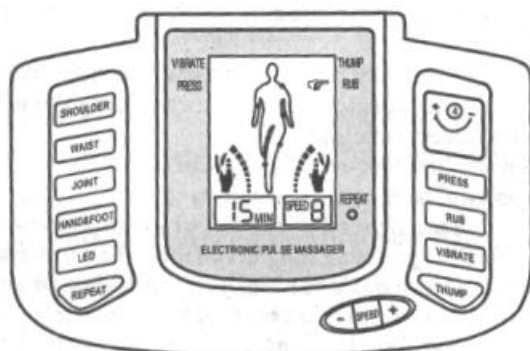

2. Elektrické přísavky (elektrody)

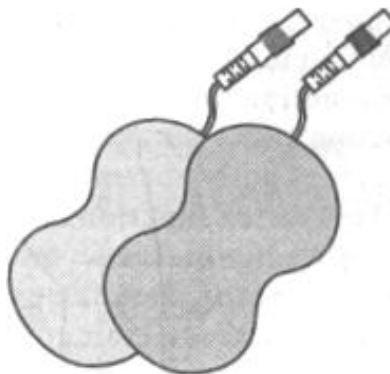

3. Mřížková destička

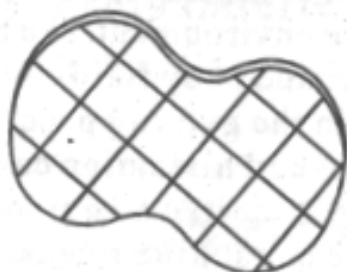


4. Masážní pantofle



5. Elektrický kabel




6. 3 ks baterií

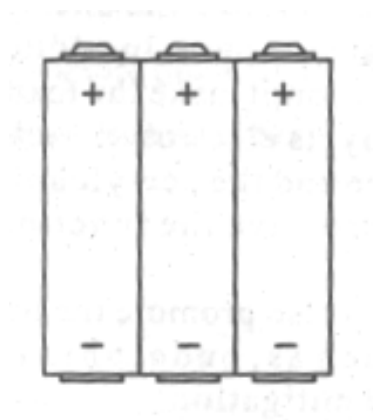

### + Návod k použití

- Elektrické přísavky jsou citlivé části, zacházejte s nimi proto opatrně
- Dodávané baterie jsou určeny k vyzkoušení přístroje

## Popis funkcí

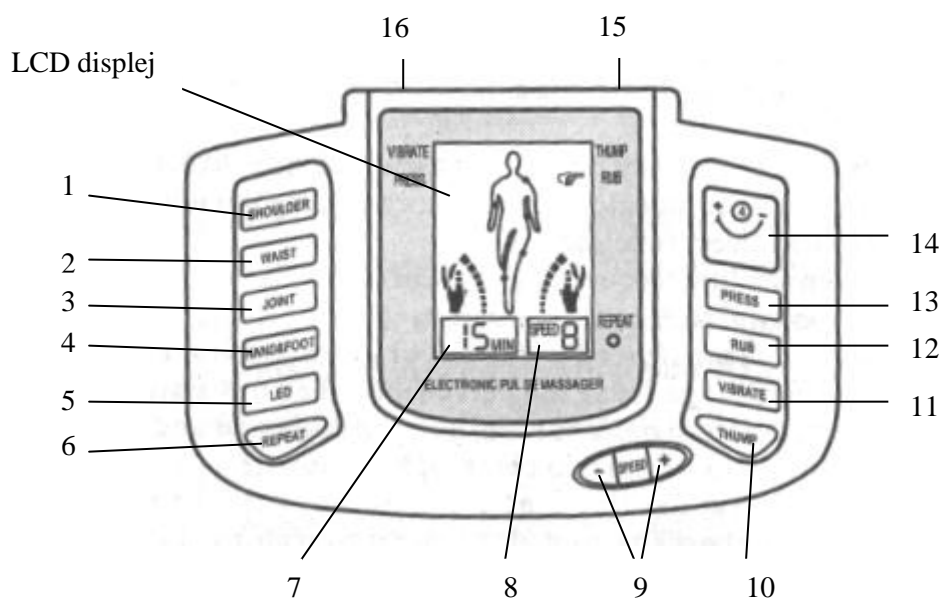

**Popis tlačítek a jiných částí:**

1. Pro masáž ramen a zad	9. Pro zvýšení nebo snížení rychlosti
2. Pro masáž pasu	10. Bušení - masážní mód
3. Pro masáž kloubů	11. Vibrace - masážní mód
4. Pro masáž rukou a chodidel	12. Tření - masážní mód
5. Pro masáž stehen, kolen a nohou	13. Mačkání - masážní mód
6. Pro opakování 5 výše zmíněných oblastí	14. Pro ovládání intenzity (kolečkem z boku)
7. Doba masáže	15. Výstup pro elektrody
8. Rychlost masáže	16. Vstup pro napájení

**LCD displej:**


Zobrazí se po kliknutí na tlačítko VIBRATE

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko PRESS

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko HAND&FOOT

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko JOINT

Čas do konce masáže

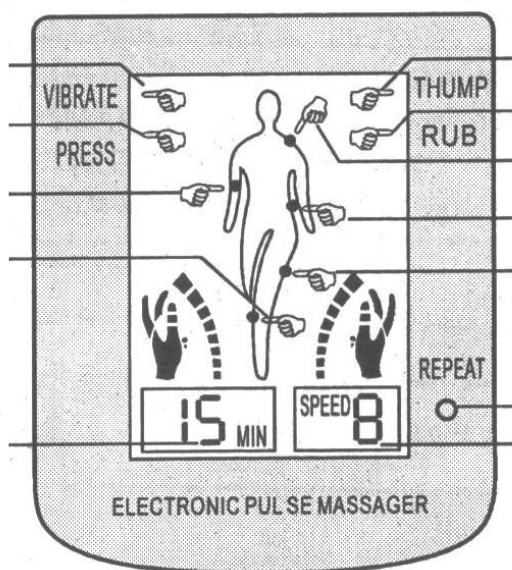

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko THUMP

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko RUB

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko SHOULDER

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko WAIST

Zobrazí se po kliknutí na tlačítko LEG

Indikační dioda pro funkci opakování

Stupeň rychlosti masáže 1-9

**Upozornění**

- Přístroj nikdy nepoužívejte, jestliže:
  - Vlastníte nějaké do těla voperované zařízení, jako např. kardiostimulátor, nebo jiné přístroje, které slouží k udržení životních funkcí
  - Vlastníte zařízení, spojené s Vaším zdravím, jež můžete přenést, např. elektrokardiograf
- Lidé, trpící vážnými chorobami, by měli používání tohoto přístroje konzultovat s lékařem.
- Elektrické přísavky nepokládejte na tělo do prekordální oblasti (část hrudníku v místě srdce), na hlavní tepny a těhotné ženy v oblasti břicha.

**Nemělo by uniknout Vaší pozornosti**

- Jakmile zjistíte jakékoliv abnormality na kůži v místech používání přístroje, přestaňte jej používat a konzultujte tyto skutečnosti s lékařem.
- Pokud chcete přemístit elektrické přísavky na jiné místo na těle, nejprve vypněte přístroj a až poté měňte jejich polohu.
- Při používání zamezte styku elektrod s kovovými předměty, jako např. hodinkami, náramky apod.
- Nenechte děti a osoby neschopné posoudit následky svého chování obsluhovat přístroj. Raději jej uskladněte na místa, kam děti nedosáhnou.
- Nepoužívejte přístroj v koupelně a na jiných vlhkých místech.

## Elektrický pulzní masážní přístroj

- Nepoužívejte jej k jiným účelům, než k jakým byl vyroben.
- Baterie neházejte do ohně.


### Příprava k použití

#### Instalace baterie

1. Otevřete kryt baterie ve směru šipky.
  2. Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.
  3. Zavřete kryt.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
  - Nepoužívejte současně různě nabitá baterie. Vždy vyměňte obě zároveň.
  - Baterie dodávané spolu s přístrojem jsou určeny k otestování funkčnosti, proto nejspíše nevydrží déle než tři měsíce.

### Metody používání

Vibrace  
Mačkání

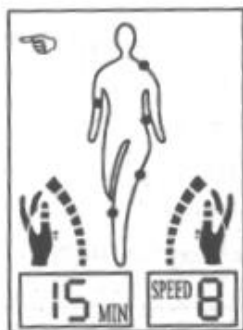


Bušení  
Tření



Vibrace  
Mačkání



Bušení  
Tření

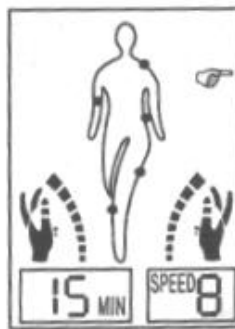

#### Umístění elektrod

Ramena



Pas



Paže



Noha



Klouby



## Elektrický pulzní masážní přístroj

- Po zapnutí přístroje je automaticky zvolen režim Tření.

### Intenzita a nastavení rychlosti

- Točením kolečka na boku přístroje nastavíte požadovanou intenzitu.
- Mačkáním "+" a "-" vedle SPEED zvyšujete, respektive snižujete rychlost péče.
- Intenzitu můžete nastavit na stupnici 1-8 pro všechny programy.
- Rychlost lze nastavit jen u programů ručně ovládaných (vibrace, mačkání, bušení a tření) na stupnici 1-9.

### Tlačítko "REPEAT"

- Při používání jednoho z automatických programů (levá část tlačítek) můžete zmáčknout tlačítko "REPEAT" pro opakování programů. Rozsvítí se indikační dioda.
  - Po opětovném zmáčknutí "REPEAT" se funkce opakování vypne a zhasne dioda.
- REPEAT lze použít pouze pro automatické programy.

### Masáž pomocí masážních pantoflí


- Pantofle mají 4 magnety a jeden připínací cvoček. Připojte dodávaný elektrický kabel k přístroji a připínacím cvočkům.
- Po propojení si nazujte pantofle a zapněte přístroj.

### Vypnutí přístroje po použití

- Otočte kolečkem pro nastavení intenzity proti směru hodinových ručiček až do pozice OFF.
- Očistěte elektrické přísavky a položte je na mřížkovanou destičku.
- Nikdy netahejte při odpojování elektrického kabelu přímo za kabel, nýbrž za zástrčku.
- Elektrody očistěte vodou nebo vlhkým hadříkem, nepoužívejte kartáč.

## Údržba

Očistěte hlavní část, použijte bavlněný hadřík namočený ve vodě nebo tekuté mýdlo. Nepoužívejte ředidlo ani alkohol.

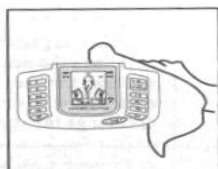


Nepokládejte přístroj do blízkosti televize nebo jiných zařízení s elektromagnetickým zářením.

Přístroj, prosíme, nepokládejte na místa s vysokou vlhkostí, teplotou nebo na přímé sluneční světlo.





Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prosíme, nerozebírejte přístroj ani jej nenechte spadnout z větší výšky.

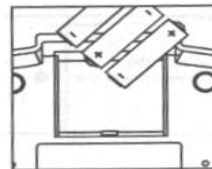

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte, prosíme, baterie.

Lepkavost elektrod se po delším čase používání vytratí. Pak už můžete jejich povrch čistit vlhkým hadříkem.

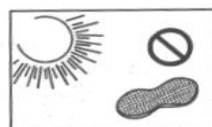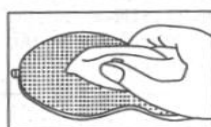

Nepokládejte elektrody na místa s vysokou vlhkostí, teplotou a na přímé sluneční světlo.

- Elektrody ztratí svůj lepkavý povrch po delším čase používání, poté, prosíme, kupte nové.

## Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Žádná stimulace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné baterie?</li> <li>• Jsou baterie vloženy správně?</li> <li>• Je správně zapojen elektrický kabel?</li> <li>• Odlepili jste ochrannou membránu elektrod?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyměňte baterie</li> <li>• Vložte baterie správně</li> <li>• Pořádně zapojte kabel</li> <li>• Odlepte ochrannou membránu</li> </ul>
Slabá stimulace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou elektrody pořádně připevněny k tělu?</li> <li>• Nepřekrývají se elektrody?</li> <li>• Nejsou elektrody špinavé?</li> <li>• Není nastavena nízká intenzita?</li> <li>• Jsou elektrody správně umístěny?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nalepte elektrody silněji</li> <li>• Odpojte elektrody a nalepte je znovu</li> <li>• Očistěte elektrody</li> <li>• Nastavte vyšší intenzitu</li> <li>• Změňte umístění elektrod</li> </ul>
Kůže je zarudlá a podrážděná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není stimulace příliš dlouhá?</li> <li>• Nejsou elektrody špinavé?</li> <li>• Nejsou elektrody připevněny příliš silně?</li> <li>• Nejsou elektrody poškozeny?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulace by měla trvat 10 - 15 minut</li> <li>• Očistěte elektrody vlhkým hadříkem</li> <li>• Odlepte a nalepte elektrody znovu</li> <li>• Vyměňte elektrody</li> </ul>
Přístroj se vypne během používání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nespadly elektrody z kůže?</li> <li>• Neodpojil se kabel?</li> <li>• Jsou v pořádku baterie?</li> <li>• Neuběhl čas stimulace?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte přístroj a nalepte elektrody znovu</li> <li>• Vypněte přístroj a znovu zapojte kabel</li> <li>• Vyměňte baterie</li> <li>• Přístroj se vypne automaticky po 15 minutách</li> </ul>
Po zapnutí není nic na displeji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou v pořádku baterie?</li> <li>• Jsou baterie vloženy správně?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyměňte baterie</li> <li>• Vložte baterie správně</li> </ul>

- Pokud se Vám nepodaří vyřešit potíže podle instrukcí, přestaňte přístroj používat a obraťte se na prodejce.

## Technická specifikace

Název	Elektrický pulzní masážní přístroj
-------	------------------------------------



## Elektrický pulzní masážní přístroj

Napájení	DC 4.5V (3 ks baterií)
Frekvence	1 - 50 Hz
Proud	Kolem 40 mA (odpor 500Ω)
Použití baterií	Každodenní použití 15 minut po tři měsíce
Rozměry	150mm x 100mm x 46mm
Hmotnost	Kolem 200 g (bez baterií)
Teplota při provozu	5 - 40°C
Vlhkost	≤ 80%
Skladovací teplota	-20 - 55°C



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  
**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**  
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759