

HOMEDICS®

BKP-112

Vibrační masážní přístroj zad



S ohřevem

Návod k použití

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI DĚTÍ, MUSÍTE DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- VŽDY odpojte spotřebič od elektrické sítě ihned po použití a před čištěním. K vypnutí otočte všechny ovladače do vypnuté pozice, poté odpojte přívodní kabel.
- NIKDY nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený k elektrické síti. Pokud jej nepoužíváte, nebo před nasazením nástavců jej odpojte od sítě.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- NESAHĚJTE na spotřebič, který padnul do vody nebo jiných tekutin. Odpojte od elektrické sítě. Udržujte suchý – NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí.
- NIKDY nevkládejte kovové předměty do přístroje.
- Použijte tento přístroj podle pokynů v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE nástavce nedoporučené HoMedics.
- NIKDY nepoužívejte poškozený přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel, zástrčku, nebo nefunguje správně, nebo po pádu. Odneste jej do HoMedics servisního střediska ke kontrole.
- Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
- Prodloužené použití může vést k nadměrnému zahřívání přístroje a zkrácení životnosti. Pokud se tak stane, přestaňte jej používat a nechte jej vychladnout.
- NIKDY nevkládejte žádné předměty do otvorů.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj na místech, kde se používají spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj pod přikrývkou nebo polštářem. Nadměrné zahřátí může způsobit požár, nebo úraz.
- NEPŘENÁŠEJTE přístroj za přívodní kabel.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj venku.
- NESTLAČUJTE. Zabraňte ostrým ohybům.
- Tento přístroj vyžaduje 220-240 V střídavé napájení.

- NEPOKOUŠEJTE se přístroj opravovat. Odnesťe jej do autorizovaného servisního střediska.
- NESEDEJTE si na zadní stranu přístroje. Přístroj lze používat k masáži zad po upevnění na židli se zády ve vertikální pozici.
- Nikdy neblokujte větrací otvory, nestavte jej na měkký podklad, jako je postel. Udržujte větrací otvory čisté.
- Neumísťujte ani neskladujte přístroj na místech, kde může padnout do vody. Neponořujte jej do vody ani jiných tekutin.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit požár nebo zranění.
- V případě nesprávného použití může dojít k popálení.
- Během provozu přístroje se nedotýkejte masážního mechanismu jinou částí těla, kromě zad.

Bezpečnostní upozornění:

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO ČÁST PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE.


- **Pokud máte obavy o vaše zdraví, konzultujte použití přístroje s doktorem.**
- Osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy musí konzultovat použití přístroje s doktorem. Nedoporučujeme použití diabetiky.
- NEPOUŽÍVEJTE u batolat, invalidních nebo spících osob. NEPOUŽÍVEJTE na choulostivou pokožku nebo na osoby se špatnou cirkulací krve.
- Tento přístroj NESMÍ používat osoby s psychickými poruchami, které mají omezenou schopnost ovládat přístroj nebo které mají sensorické potíže ve spodní části těla.
- NIKDY nepoužívejte přímo na oteklé nebo podrážděné oblasti kůže.
- Pokud se necítíte dobře při masáži, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte doktora.
- Toto je neprofesionální přístroj, navržený pro osobní použití a k uvolnění svalstva. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu léčby.
- NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující efekt a může opozdit spánek.
- Nepoužívejte déle než doporučenou dobu.
- Nedoporučujeme použití na dřevěném povrchu, neboť zip může poškodit dřevo. Zvyšte pozornost při použití na čalouněném nábytku.
- Zvyšte pozornost při použití ohřevu. Pokud máte pocit nadměrné teploty, vypněte přístroj a kontaktujte servisní středisko HoMedics.

- Vůči sedlu vyvíjejte pouze přiměřený tlak, abyste zabránili zranění.
- Účinek masáže můžete zmírnit vložení ručníku mezi tělo a masážní přístroj.
- Přístroj je vybaven ohřevným povrchem. Osoby citlivé na teplo musí při použití přístroje zvýšit pozornost.
- Nedoporučujeme používat na koženém nábytku.
- Držte vlasy, oděvy a šperky mimo masážní mechanismus a veškeré pohyblivé části přístroje.

Poznámka:

Pro vaši bezpečnost je tento výrobek vybaven tlakovým spínačem k ovládní funkce ohřevu. Ohřev se neaktivuje, dokud není vyvinut tlak na tento spínač, umístěný na zadním sedacím polštáři přístroje. Po uvolnění tlaku se ohřev vypne. Po aplikování tlaku počkejte 5-10 minut, než ucítíte maximální teplo.

Popis WEEE

 Toto označení znamená, že přístroj nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Abyste zabránili možnému negativnímu vlivu na lidské zdraví nebo životní prostředí, zajistěte správnou recyklaci přístroje. Pro podrobnější informace o recyklaci kontaktujte místní středisko, nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Zajistí správnou recyklaci přístroje.

Popis přístroje

Uklidňující teplo


Stisknutím aktivujete/deaktivujete.

Intenzita masáže

Jedním stisknutím aktivujete LOW (nízkou) a opětovným stisknutím HIGH (vysokou) intenzitu masáže.

Zapnutí/vypnutí

Jedním stisknutím zapnete a opětovným stisknutím vypnete masáž.

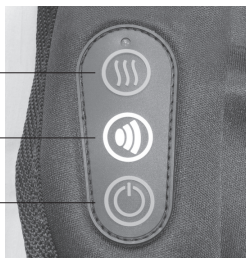


Napájecí adaptéry

Tento přístroj je napájen vlastním 220-240 V adaptérem a 12 V DC adaptérem do auta (konektor pro zapalovač). Oba jsou součástí dodávky.

Vibrační masážní motory

Ohřev

Integrované ovládání

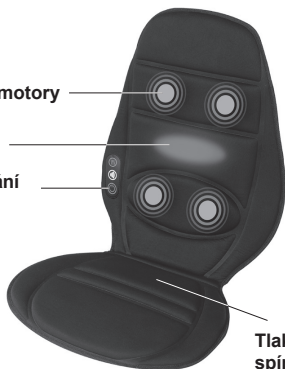

Tlakový spínač

POZNÁMKA

- Při zvolení funkce masáže s ohřevem nastane mírné snížení intenzity masáže. Je to zcela normální a nepředstavuje závadu.
- Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut najednou.
- Funkce masáže a ohřevu funguje pouze po aktivaci tlakového spínače, když si na něj sednete.

Pokyny k použití

Použití doma a v kanceláři

Připojte adaptér k 220-240 V síťové zásuvce a další konektor ke vstupnímu konektoru na boční straně polštáře. Masážní přístroj upevněte k židli pro pohodlnou masáž při čtení nebo při práci.

Použití v autě

Jednoduše připojte 12 V adaptér do auta ke konektoru zapalovače a druhý konec k vstupnímu konektoru na boční straně polštáře. Navlečte upevňující pásy přes sedadlo v autě pro uvolňující masáž během řízení.

Systém upevnění

Tento masážní přístroj obsahuje jedinečný upevňovací systém, který vám jej umožňuje připevnit k téměř jakémukoli židli nebo sedadlu v autě. Umístěte přístroj na sedadlo a přilepte elastické pásy pevně kolem opěradla. Masážní přístroj se nepohne ani nesesune.

Údržba:

Skladování

Uložte přístroj do krabice na bezpečné, suché místo. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které mohou poškodit látkový povrch. Abyste zabránili poškození, nenavíjejte přívodní kabel kolem přístroje. **NEPŘENÁŠEJTE** přístroj za přívodní kabel.

Čištění

Odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte pouze jemnou, mírně navlhčenou hubkou.

- Neponořujte přístroj do tekutiny.
- Nikdy nepoužívejte drsné čističe, kartáče, leštidla na sklo/nábytek, ředidlo, apod.
- Masážní přístroj se nepokoušejte opravovat. Uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Za účelem opravy jej odešlete do servisního střediska HoMedics.

Dovozce do ČR: DSI Czech, spol. s r.o.,
Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Servisní středisko: DSI Slovakia spol. s r.o.,
Južná trieda 117, 040 01 Košice, SR

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.