

LANAFORM®

Back Massager

Massager cushion



Vibrating and
Heating

Vibrant et
Chauffant

Trillend en
verwarmend

BACK MASSAGER

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali masážní zařízení „BACK MASSAGER“ od společnosti LANAFORM®, které v sobě spojuje kvalitu a jednoduchost. Zařízení „BACK MASSAGER“ je masážní podložka na křeslo, která je vybavena pěti motory. Tyto motory vytvářejí vibrace, které vám umožní snížit napětí, svalovou bolest a zklidnit svalovou únavu. Velmi pohodlné a snadno použitelné zařízení „BACK MASSAGER“ vám nabízí příjemnou vibrační masáž. Toto zařízení je vybaveno funkcí, díky níž si můžete vybrat cílovou oblast pro danou masáž, a rovněž tak je vybaveno automatickou funkcí, která vám nabízí harmonický cyklus složený z různých typů masáží. Přístroj je možno snadno ovládat pomocí přehledného dálkového ovladače, který se díky svému ergonomickému tvaru dokonale přizpůsobí každé ruce. Zařízení „BACK MASSAGER“ lze používat v kanceláři i doma.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ „BACK MASSAGER“ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NIŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Toto zařízení použijte pouze k účelům, pro něž je určeno, viz návod k použití.
- Než zařízení použijete, je nutné odstranit sáček se silicí proti vlhkosti.
- Tento výrobek není určen pro osoby (většinou děti) s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud výše uvedené osoby nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo ještě nebyly poučeny o používání zařízení. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Použijte výhradně doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky doporučované společností LANAFORM®.
- V případě poškození napájecího kabelu jednotky je nutno ho nahradit stejným nebo podobným kabelem, který můžete zakoupit u dodavatele nebo v servisní provozovně.
- Zařízení nesmí být použito v případě, je-li je poškozen napájecí kabel, zařízení nefunguje správně, upadlo na zem nebo je poškozeno či spadlo do vody. Nechte proto váš přístroj zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Přístroj zásadně nepřenášejte zavěšený za přívodní kabel a přívodní kabel nepoužívejte jako držadlo.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Zařízení, které spadlo do vody, okamžitě odpojte ze sítě, a to ještě před jeho vylovením z vody.
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Jestliže zařízení nepoužíváte, odpojte ho.
- Napájecí kabel nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte toto zařízení před spaním. Masáž má stimulační účinky, které mohou ovlivnit pocit únavy.
- Toto masážní zařízení zásadně nepoužívejte během spánku.
- Nedopusťte, aby na zařízení upadl jakýkoliv předmět, a stejně tak aby žádné předměty (připínáčky či jiné kovové předměty) nebyly do něj vkládány či zapichovány.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde se podává nebo skladuje kyslík.
- Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Před odpojením přístroje z elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je tlačítko „ON/OFF“ v poloze „OFF“ (Vypnuto).
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto přístroje na svého ošetřujícího lékaře.
- Jestliže během používání zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte pro masírování části těla, která je oteklá, zanícená či zasažená kožní vyrážkou.
- Tento výrobek je masážním zařízením pro neprofesionální využití, který je sestaven tak, aby zmírňoval svalovou únavu. Tento přístroj nepoužívejte jako náhradu lékařské péče. Přístroj je určený výhradně pro domácí použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Technická specifikace


- Vibrační masáž
- 5 motorů
- 4 režimy vibračních masáží doplněné o jeden automatický režim
- 4 intenzity masáže
- 4 masážní zóny (horní část zad / spodní část zad / hýždě a stehna)
- 1 „zahřívací“ funkce
- Časovač (15, 30 nebo 60 min.)

2. Popis zařízení „BACK MASSAGER“

System upínacích popruhů:

Součástí vybavy masážního přístroje „BACK MASSAGER“ je systém upínacích popruhů, díky nimž jej lze snadno uchytit na jakémkoliv křesle. Upínací popruhy natáhněte na obě strany opěráku, spojte je a upevněte pomocí zakončení na suchý zip.

Ovládací prvky ovladače:

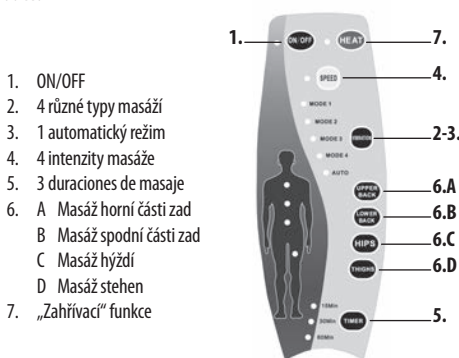

1. ON/OFF
2. 4 různé typy masáží
3. 1 automatický režim
4. 4 intenzity masáže
5. 3 duraciones de masaje
6. A Masáž horní části zad
B Masáž spodní části zad
C Masáž hýždí
D Masáž stehen
7. „Zahřívací“ funkce

3. Použití zařízení „BACK MASSAGER“

ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)

„BACK MASSAGER“ se používá v kombinaci s adaptérem. Nejprve zapojte koncovku napájecího kabelu do zásuvného konektoru (samice) na pravé straně masážní podušky. Potom adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Po zapojení do zásuvky elektrického napájení je přístroj „BACK MASSAGER“ připravený k použití.

Zapínání a vypínání přístroje je ovládáno stisknutím tlačítka ON/OFF (viz schéma, bod 1).

Režim manuálního ovládání

V tomto režimu si můžete vybrat:

Jeden ze čtyř nabízených typů masáže: Režim 1, 2, 3, 4 (viz schéma, bod 2).

Jednu ze čtyř nabízených intenzit (viz schéma, bod 4).

Délku trvání masáže (15, 30 nebo 60 min.) (viz schéma, bod 5).

Oblast masáže podle vaší chuti a/nebo potřeb (viz schéma, body 6a, 6b, 6c, 6d).

„Zahřívací“ funkce, která přispívá k uvolnění svalového napětí (viz schéma, bod 7).

Důležité upozornění: Jestliže máte na sobě svetr, sako nebo jiný podobný oděv, může se stát, že nebudete teplo cítit.

Automatický režim (viz schéma, bod 3)

Tento režim je složen z jednotlivých typů masáží. Tato funkce je zajímavá v případě, že požadujete různé typy masáže. Funkce „TIMER“, „SPEED“, „HEAT“ a požadovaná oblast masáže mohou být rovněž využívány v automatickém režimu.

ÚDRŽBA

Skladování

- Přístroj „BACK MASSAGER“ uložte do krabice, v níž byl dodán, a na suché místo.
- Ujistěte se, zda zařízení není v kontaktu ostrými hranami či špičatými předměty, které by mohly způsobit poškození textilního povrchu zařízení.
- Aby nedošlo k porušení napájecího kabelu, neomotávejte jej kolem masážního polštáře.
- Masážní podušku nezávěšujte za kabel ručního ovladače nebo za napájecí kabel.

Čištění

- Před čištěním odpojte masážní podušku z elektrické sítě a několik minut vyčkejte.
- Čištění se provádí pomocí jemné, mírně navlhčené houbičky.
- Dbejte na to, aby se poduška nedostala do kontaktu s vodou či s jakoukoliv jinou kapalinou.
- Při čištění nenamáčejte zařízení do kapaliny.
- Při čištění zásadně nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče ani ředidla.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.