

## návod k použití

# masážního přístroje na nohy a lýtka

MGF-K68




Děkujeme, že jste si koupili mini masážní přístroj na nohy a lýtka NAIPO MGF-K68.

S běžnou péčí a údržbou může dobře sloužit léta.

Přečtěte si bedlivě všechny pokyny, než začnete výrobek používat.

Tento návod uchovejte, abyste jej mohli použít i později.


## Bezpečnostní pokyny

 Ještě před tím, než masážní přístroj uvedete do chodu, bedlivě si přečtěte níže uvedené pokyny, aby přístroj fungoval správně a s optimální účinností. Tyto pokyny si ponechte, abyste je mohli použít později!

- Tento přístroj splňuje náležité technické normy a nejnovější bezpečnostní předpisy.
- Tento přístroj NENÍ HRAČKA. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
- Nedovolte, aby přístroj používalo v jednom okamžiku více osob než jedna.
- Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti.
- Pro tento přístroj nikdy nepoužívejte jiné zdroje napájení než je dodávaný domácí síťový adaptér.
- Jakékoliv možné opravy smí provádět výhradně pověřený odborník. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno provádět neschválené opravy. Jiná oprava, než v odborném servisu je důvodem ztráty záruky.
- Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, nesmí být vystaven vysoké teplotě a přímému slunečnímu světlu.
- Je zakázáno poškozovat, nadměrně kroutit, tahat, překrucovat či zauzlovat přírodní elektrický kabel.
- Nepoužívejte poškozené kabely, zástrčky a uvolněné zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel.
- V případě závady přístroj neprodleně odpojte od elektřiny.
- Nesprávné použití nebo zneužití vylučuje jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Nepoužívejte během spánku.
- Abyste nadměrně nestimulovali svaly a nervy, nepoužívejte masážní přístroj nepřetržitě déle než 15 minut.
- Nepoužívejte přístroj k léčebným účelům.
- Osoby citlivé na teplo musí při používání přístroje doprovázet další osoba.
- Pokud budete mít při používání nezvyklé pocity, ihned přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.

 Před použitím přístroje doporučujeme poradit s lékařem pro osoby, na které se vztahuje následující popis:

1. Ti, kdo mají implantovaný léčebný elektronický přístroj, jako je například kardiostimulátor.
2. Ti, kdo se léčí, zvláště pokud se necítí dobře.
3. Ti, kdo mají zhoubný nádor, nemoci srdce nebo akutní onemocnění.
4. Ženy, které jsou těhotné nebo menstrují.
5. Ti, kdo mají osteoporózu nebo poraněnou páteř.
6. Ti, kdo mají nemoci kůže nebo mají kůži poraněnou.
7. Ti, kdo mají tělesnou teplotu nad 38 stupňů.

 Pokud výše uvedené pokyny nedodržíte, jedná se o zneužití přístroje, které může mít za následek vážné poranění či popáleniny.

## Vlastnosti výrobku

- masážní přístroj na nohy a lýtka nebo vyhřívané sedátko 2 v 1
- šiatu, tlaková a tepelná masáž nohou a lýtek
- 3 masážní režimy
- 3 úrovně intenzity tlaku
- 3 rychlosti hnětení/vibrací
- 2 teplotní nastavení
- odnímatelná a prátelná pouzdra na chodidla



## Nastavení a činnost

1. Položte přístroj na rovnou podlahu.
2. Připojte kabel od síťového adaptéru do správné zdířky v masážním přístroji.
3. Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky (adaptér lze použít jak v sítích 100–120 V, tak 220–240 V).



## Jak přístroj použít



varianta 1: vyhřívané sedátko



varianta 2: masážní přístroj na nohy a lýtka

### Varianta 1. Použití jako sedátko

- 1) Po zapnutí stisknete tlačítko „Heat“ (vyhřívání). Zapnete funkci vyhřívání a získáte pohodlné sedátko nebo podpěru pro nohy. Dalšími stisky tlačítka „Heat“ nastavujete slabší/silnější vyhřívání nebo vyhřívání vypnete.
- 2) Po odpojení adaptéru můžete přístroj používat jako běžné sedátko nebo podpěru pro nohy.

### Varianta 1. Použití jako masážní přístroj na nohy a lýtka

- 1) Otevřete zařízení a použijte je jako masážní přístroj na nohy a lýtka.




- 2) Upravte polohu podpěry naspodu přístroje na požadovaný úhel nastavení.
- 3) Zvolte si křeslo s vhodnou výškou a posadte se. Vložte nohy do masážního přístroje.

4) Zapněte masážní přístroj přes ovládací panel (viz pokyny níže).



- Poznámka: Nenastavujte a nepoužívejte přístroj v koupelně či podobně vlhkém prostředí.

## Ovládací panel a funkce přístroje

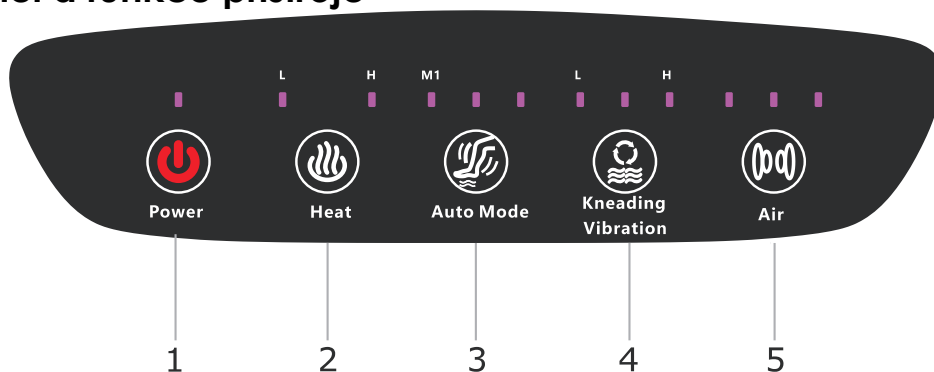

### 1. Vypínač

Po zapnutí do elektřiny začne blikat kontrolka a přístroj bude v pohotovostním režimu. Stiskem tohoto tlačítka masážní přístroj zapnete.

Když je přístroj zapnutý, stiskem tohoto tlačítka vypnete veškeré jeho funkce.

### 2. Tlačítko vyhřívání

Po zapnutí stiskem tohoto tlačítka zapínáte vyhřívání. Dalšími stisky postupně nastavujete nízkou teplotu/vysokou teplotu, nebo vyhřívání vypnete. Podle nastavení teploty se rozsvítí příslušná kontrolka L (nízká) / H (vysoká).

### 3. Tlačítko automatického režimu

Po zapnutí přístroje tímto tlačítkem zapínáte plně inteligentní masážní režimy. Postupnými stisky přepínáte mezi režimy M1 až M3 nebo vypnutím automatiky.

Režim 1 – Rozsvítí se M1 (kombinace tlakové masáže, šiatu hnětení a vibrace).

Režim 2 – Rozsvítí se M2 (hlavní funkce tlakové masáže, střídavě se zapíná šiatu hnětení a vibrace).

Režim 3 – Rozsvítí se M3 (hlavní funkce hnětení a vibrací, střídavě se zapíná tlaková masáž).

### 4. Tlačítko hnětení a vibrací

Po zapnutí přístroje stiskem tohoto tlačítka zapínáte masážní funkce hnětení a vibrace. Dalšími stisky přepínáte nízkou, střední a vysokou rychlost nebo funkci vypnete. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

### 5. Tlačítko tlakové masáže

Po zapnutí přístroje stiskem tohoto tlačítka zapínáte tlakovou masážní funkci. Dalšími stisky přepínáte nízkou, střední a vysokou intenzitu nebo funkci vypnete. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

- Toto zařízení se automaticky vypne po 15 minutách funkce.

### POZOR!!!

- Po zapnutí lze libovolně přizpůsobit nastavení tlakové masáže, hnětení, vyhřívání a vibrací.
- Funkce „Automatický režim“, „Hnětení/vibrace“ a „Tlaková masáž“ jsou k dispozici pouze v případě, když přístroj otevřete, abyste jej používali jako masážní přístroj pro nohy a lýtka.
- Při použití přístroje jako sedátka je k dispozici pouze funkce vyhřívání.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!