


# Stolní ústní sprcha

## Návod k použití

**WT 6000**  
**Dr. Mayer**  
LIFE & HEALTH

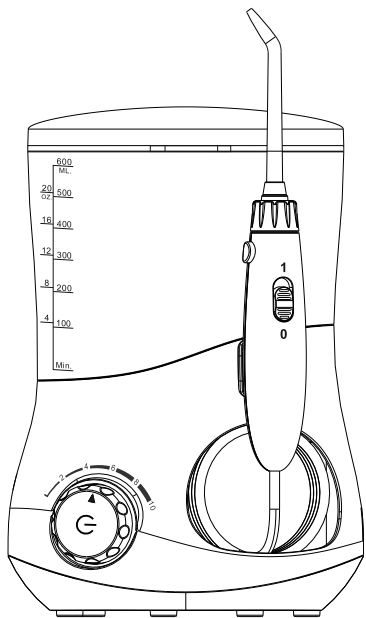

CZ

**Součásti a příslušenství:** Ústní sprcha (1 ks), napáječ (1 ks), standardní tryska (3 ks), čistící jazyka (1 ks), návod k použití (1 ks)

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně a také nezranit sebe ani jiné osoby.

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

### PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nesmějí používat malé děti. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Dojde-li k poškození šňůry nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte.
- Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Zařízení se nesmí dostat do vody ani do jiné tekutiny.
- Zařízení nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla či vany.
- Přístroj nepoužívejte ve vaně.
- Spadne-li zařízení do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.


#### UPOZORNĚNÍ

- Děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zařízení používat pouze pod dohledem.
- Se zařízením si nesmějí hrát děti.
- Zařízení se smí používat pouze s napáječem dodaným v jeho příslušenství.
- Chraňte zařízení před horkými předměty.
- Používejte výhradně nástavce doporučené výrobcem.
- Zařízení nepoužívejte bez trysky.
- Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě jí může spolknout a hrozí uvíznutí v krku.
- Proudem vody nemířte na jazyk, do uší, nosu ani na jiná citlivá místa.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.
- Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Některé ústní vody mohou poškodit zařízení, a zejména zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vodu.
- Zařízení nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní, a v takových případech je třeba jeho užívání konzultovat s lékařem.
- Trysku přístroje nepřikládejte příliš blízko k zubům a dásním, mohlo by dojít k poškození dásní.
- Zařízení je určeno k použití v interiéru.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou.

### TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE

### SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

#### Ústní sprcha

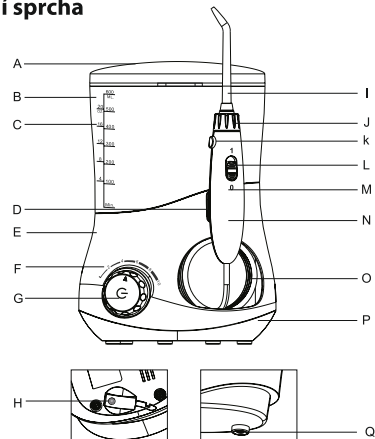

- A: Víko s poudrem na trysku
- B: Nádržka na vodu
- C: Značka plnění
- D: Úchyt aplikátoru
- E: Těleso zařízení
- F: Symbol regulace tlaku
- G: Hlavní ovladač (stiskem zapíná a vypíná) (otáčením reguluje tlak)
- H: Přípojka napájení
- I: Tryska

- J: Spojka trysky
- K: Uvolňovací tlačítko
- L: Funkční spínač
- M: Symbol vypínače
- N: Aplikátor
- O: Hadička
- P: Podstavec
- Q: Ventil zásobníku

#### Příslušenství



Mění se každých 6 měsíců


Mění se každé 3 měsíce

### ZPŮSOB POUŽITÍ


#### ZAČÍNÁME

Postavte zařízení na rovnou podložku bez ostrých předmětů a zkontrolujte, zda je jeho šňůra suchá a nepoškozená. K napájení přístroje slouží síťový napáječ (vstup: 100–240 V, výstup 50/60 Hz 12 V, 1,5 A).


1. Zapojte konektor napáječe do přípojky na spodku podstavce. Síťovou zástrčku napáječe zapojte do sítě podle obr. 1.
2. Sundejte víko s poudrem.
3. Vyndejte zásobník a naplňte jej vodou o teplotě do 40 °C, bez jakékoliv soli, zubní pasty či jiných chemických prostředků. Nasadte a zatlačte zásobník do hlavní jednotky (obr. 2-1 a 2-2).

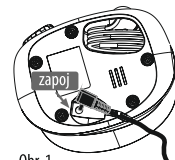

Obr. 1

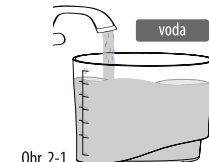

Obr. 2-1

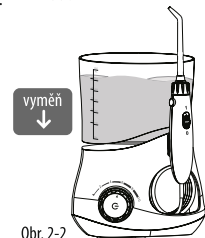


Obr. 2-2


#### Nasazení a vysazení aplikátoru

##### Nasazení trysky

Nasadte trysku na střed spojky do rukojeti aplikátoru. Při správném sesazení je doseknutí slyšitelné. Pro ověření pevného zamknutí zkuste trysku vytáhnout (obr. 3)

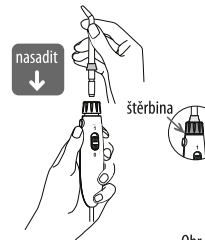

Obr. 3

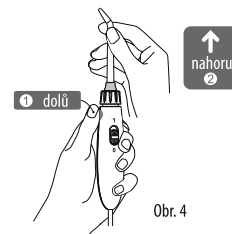

Obr. 4

##### Vysazení trysky

Stiskněte uvolňovací tlačítko na konci rukojeti a druhou rukou trysku opatrně vytáhněte (obr. 4).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!