


# Stolní ústní sprcha

Návod k použití

WT5000

**Dr. Mayer**  
LIFE & HEALTH

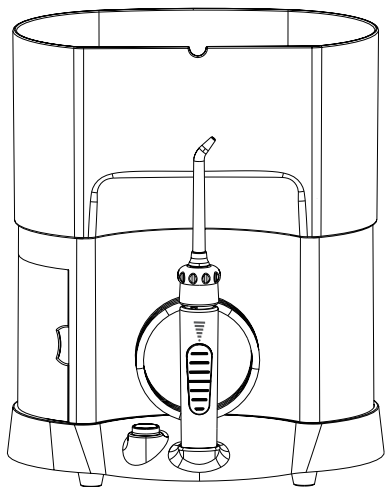

## NEPŘEHLÉDNĚTE

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně a také, nezranit sebe ani jiné osoby.

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

## PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Zařízení nesmí používat malé děti. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Dojde-li k poškození šňůry nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte.
- Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Zařízení se nesmí dostat do vody ani do jiné tekutiny.
- Zařízení nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umyvadla či vany.
- Přístroj nepoužívejte ve vaně.
- Spadne-li zařízení do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.

### UPOZORNĚNÍ

- Děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zařízení používat pouze pod dohledem.
- Se zařízením si nesmí hrát děti.
- Zařízení se smí používat pouze s napájecím dodaným v jeho příslušenství.
- Chraňte zařízení před horkými předměty.
- Používejte výhradně nástavce doporučené výrobcem.
- Zařízení nepoužívejte bez trysky.
- Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě jí může spolknout a hrozí uvíznutí v krku.
- Proudem vody nemiňte na jazyk, do uší, nosu ani na jiná citlivá místa.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.
- Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Některé ústní vody mohou poškodit zařízení, a zejména zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vodu.
- Zařízení nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní, a v takových případech je třeba jeho užívání konzultovat s lékařem.
- Trysku přístroje nepřikládejte příliš blízko k zubům a dásním, mohlo by dojít k poškození dásní.
- Zařízení je určeno k použití v interiéru.
- Zásobník plňte pouze čistou vodou.

## TENTO NÁVOD SI DOBRĚ ULOŽTE


### SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

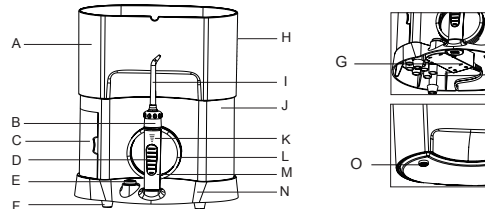

A: Zásobník na vodu  
B: Spojka trysky  
C: Dviřka  
D: Regulátor tlaku  
E: Funkční vypínač  
F: Gumová nožka  
G: Kryt přípojky

H: Značka plnění  
I: Tryska  
J: Skříň přístroje  
K: Symbol regulace tlaku  
L: Hadička  
M: Aplikátor  
N: Podstavec  
O: Ventil zásobníku

### Příslušenství

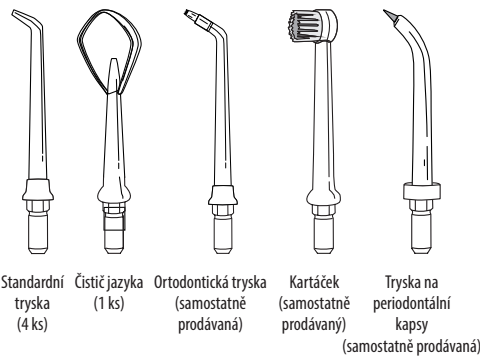

Standardní tryska (4 ks)  
Čistič jazyka (1 ks)  
Ortodontická tryska (samostatně prodávána)  
Kartáček (samostatně prodáváný)  
Tryska na periodontální kapsy (samostatně prodávána)

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### ZAČÍNÁME

Postavte zařízení na rovnou podložku bez ostrých předmětů a zkontrolujte, zda je jeho šňůra suchá a nepoškozená. K napájení přístroje slouží síťový napáječ (vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, výstup 12 V ss, 1,5 A).





1. Zapojte konektor napáječe do přípojky na spodku podstavce. Síťovou zástrčku napáječe zapojte do sítě podle obr. 1.
2. Zapněte zařízení, zkontrolujte správné zapojení a napájení a poté zařízení vypněte (obr. 2).
3. Vysaďte zásobník vody a nainstalujte do správného místa ventil.
4. Napiňte zásobník vodou o teplotu do 40 °C, bez jakékoliv soli, zubní pasty či jiných chemických prostředků, nasadte a zatlačte zásobník do hlavní jednotky (obr. 3).
5. Zatlačte dolů kroužek spojky a na střed spojky do rukojeti aplikátoru nasadte trysku. Pro ověření pevného zamknutí zkuste trysku vytáhnout (obr. 4).
6. Před použitím zavřete proudění vody přesunem regulátoru tlaku do polohy (+) podle obr. 5.

### Poznámka:

Při prvním použití můžete v některých částech přístroje (v zásobníku, hadičce aj.) zjistit nepatrné zbytky vody. Jde o destilovanou vodu, která se používá ke kontrole funkčnosti výrobku a není zdraví škodlivá.

Zařízení nezapínejte, dokud není tryska v ústech.

1. Uchopte aplikátor za rukojeť, namířte trysku do umyvadla a stiskem funkčního vypínače aplikátor zapněte. Fungování indikuje modré světlo kolem tlačítka (obr. 6).
2. Posuvem regulátoru na rukojeti aplikátoru nastavte tlak vody a vypněte zařízení (obr. 7).

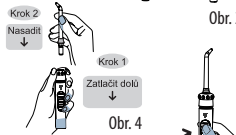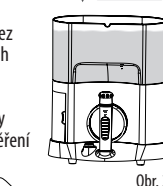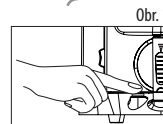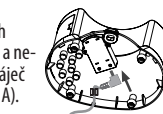


### Poznámka:

Při použití si zpočátku nastavte nižší tlak a pak jej podle potřeby postupně zvyšujte.


- Upravte směřování trysky, nakloňte se nad umyvadlo, namířte trysku do úst a přivřete ústa, aby voda nestříkala ven (obr. 8).
- Zapněte proudění vody a ostříkujte.
- Tryskou mířte kolmo na zuby a dásně (obr. 9).
- Pomalou pohybujte tryskou po zubech a pomocí vytáčení trysky ostříkejte všechna potřebná místa (obr. 10).



Obr. 8

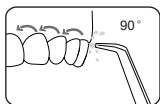


Obr. 9

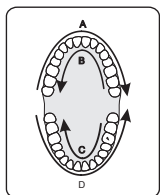


Obr. 10



Obr. 11

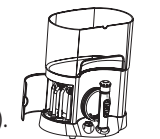

Obr. 12

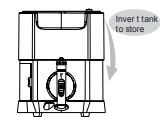

Obr. 13

### Poznámka:

Během ostříkování lze upravovat tlak vody regulátorem na rukojeti a směr proudění otáčením kroužku spojky trysky.


### Po použití

- Vyndejte zásobník ze zařízení a vylijte zbytek vody.
- Nastavte regulátor tlaku na maximum, zapněte přístroj a vypusťte z přístroje veškerou vodu.
- Vypněte zařízení a otřete jej utěrkou do sucha (obr. 11).
- Zatlačte dolů kroužek spojky na vrchu rukojeti, vysaďte trysku a uložte ji do pouzdra (obr. 12).
- Odpojte napáječ.
- Nasadte zásobník dnem vzhůru. (obr. 13).

### Doporučení

#### Čistič jazyka


Při čištění jazyka zlehka přiložte čistič v ose jazyka asi doprostřed ústní dutiny. Začněte s malým tlakem vody a zvyšujte jej postupně, podle potřeby (obr. 14).

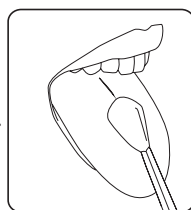

Obr. 14

#### Ortodontická tryska

(samostatně prodávané příslušenství) Ortodontická tryska je určena speciálně pro uživatele rovnátek. Umožňuje čistit rovnátka i místa, která jsou kvůli rovnátkům těžko přístupná.

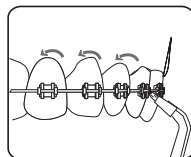

Obr. 15

Tryskou mířte kolmo na zuby v linii kraje dásně, začněte od poslední stoličky (zezadu) a pomalu pohybujte tryskou podél linie dásně, s pozastavením na čištění kartáčkem mezi zuby a kolem rovnátka. Stejným způsobem očistěte přední i zadní stranu všech ostatních zubů (obr. 15).


#### Tryska na periodontální kapsy

(samostatně prodávané příslušenství) Tryska na periodontální kapsy je určena k čištění periodontálních kapes. Při čištění těchto kapes je NUTNÉ nastavit na přístroji nejnižší tlak.



Obr. 17

- Namířte měkkou špičku na zub v úhlu 45 stupňů, zvolna ji přiložte k okraji dásně a vsuňte do kapsy (obr. 17).
- Zapněte přístroj a pohybem pod linií dásně dokončete ošetření (obr. 18).

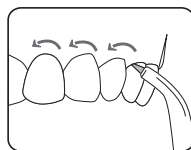


Obr. 18

#### Poznámka:

Trysku je NUTNÉ používat s nastavením nejnižšího tlaku, protože špička se může lehko poškodit.

### Kartáček

(samostatně prodávané příslušenství) Zubní kartáček se může používat ze zubní pastou i bez ní. Kartáček přiložte k zubu v linii dásně. Po zapnutí proudí z kartáčku voda. Pohybem po linii dásně očistěte všechny části chrupu. (obr. 16).

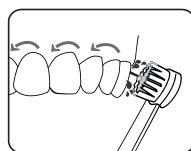

Obr. 16

### ÚDRŽBA

K čištění zařízení použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte žíravé a abrazivní prostředky (například ocet či odvápnovače). Mohou zařízení poškodit. K mytí použijte vodu do teploty 40 °C. Čraňte zařízení před horkými předměty a přímým slunečním světlem.

#### Hlavní jednotka

- Vyndejte zásobník a vylejte ze zařízení zbytek vody.
- Měkkou utěrkou s tekutým mýdlovým prostředkem zařízení omyjte a suchou utěrkou vytěře do sucha.
- Hlavní jednotka se nesmí umývat ponořená.

#### Rukojeť aplikátoru

- Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
- Hadičku neohýbejte, netahejte a, nekrťte s ní.

#### Zásobník na vodu

- Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
- Zásobník před uložením přístroje dobře upevněte.

#### Trysky

- Trysky omývejte vodou a měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
- Trysky ukládejte do pouzdra.
- Standardní trysku a čistič jazyka vyměňte za nové po každých 6 měsících, ostatní aplikační nástavce měňte každé 3 měsíce.

#### Napáječ

Každých 6 měsíců otřete kovové části konektorů suchou utěrkou.

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Motor neběží.	Zkontrolujte správné zapojení vstupu a výstupu napáječe.
		Zkontrolujte, zda funguje výstup a zda je zařízení zapnuté.
Tlak vody je velmi nízký.	Tryska je zanesená.	Očistěte nebo vyměňte trysku.
	Tryska je zdeformovaná.	Vyměňte trysku.
	Je zanesený ventil zásobníku.	Vyčistěte ventil a naplňte zásobník čistou vodou.
Nestříká voda.	Zásobník je prázdný.	Naplňte zásobník.
	Tlak vody je pod mezí nejnižšího nastavení.	Upravte tlak regulátorem.
	Ventil zásobníku je zavřený.	Dotlačte zásobník do správné polohy, проверте montáž ventilu.
Zásobník teče.	Ventil je nefunkční.	Vyměňte ventil zásobníku.
	Ventil není správně nainstalován.	Opravte instalaci ventilu.
Na trysce na periodontální kapsy se tvoří kapky.	Tryska je opotřebená.	Vyměňte trysku.

### LIKVIDACE

Zařízení se smí rozebrat pouze pro účely likvidace. Rozebráním se přístroj zničí. Před rozebráním musí být zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.

Kontakty:  
Distributor v ČR a SR:  
Best Brands Company s.r.o.  
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

info@bbcomp.cz  
+42077703787  
www.doctor-mayer.cz  
nebo www.bbcomp.cz



Výrobce je držitelem osvědčení ISO9001 a ISO13485.

